

 $\oplus$ 

97050847-1 04/2015




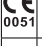



**GB** (translation from the original in Italian)

**Classification**  
Class Ila Medical device according to directive 93/42/EEC and subsequent additions and amendments. This device has been manufactured in compliance with IEC 60601-1 and ISO 14457.

**Intended Use**  
Medical device, or a medical device accessory for professional use by Dentists, assisted by authorised personnel. The device is intended for use on dental units complying with the 93/42/EEC Directive and subsequent additions and amendments complying with the IEC 60601-1 standard (III ed.) and installed in locations with an electrical plant system that complies with the IEC 60364-7-710.

**Symbols**

	Symbol to call the attention to other information found in the equipment User Manual.
	Symbol corresponding to "TYPE B PART APPLIED" according to IEC 60601-1. Indicates a protection grade against direct and indirect contacts
	Part that may be sterilised in an autoclave
	Mark of Compliance with the 93/42/EEC Directive "MEDICAL DEVICES" and subsequent additions and amendments.
	Symbol for disposal pursuant to the 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC Directives.

**Precautions**  
•The device is not suitable for use with blends of inflammable anaesthetics and oxygen or nitrous oxide.  
•Use of the device must respect the indications contained the Instruction Manual available on the website [www.sternweber.com](http://www.sternweber.com).  
•The instrument is provided in a non-sterile state. Before use, see to its suitable cleaning, disinfection and/or sterilisation (as applicable).  
•Use of electrically-powered devices may interfere with the operation of active implantable devices such as pacemakers or other active devices. In case of doubt regarding the treatment of patients with such devices, consult a cardiology expert or another competent medical institute.  
•During use of the device dust and fragments from the patient's oral cavity or from the same device may be projected into the environment (organic and inorganic dust and metal dust, fragments of the device or its tips and potentially infected biological material).  
•Protect the patient, when possible, using a dental dam.  
•Instruct the patient to breathe through the nose in cases where the dam is not applicable.  
•Professional personnel must put on suitable personal protection equipment.  
•In case of visible damage or of the emission of unusual noises and/or vibrations or if overheating is noticed, do not use the device and call authorised technical service assistance.  
•Before each use, verify the proper locking of the burrs. If the burr does not fit correctly, do NOT use the tool.  
•Do not use worn or damaged burrs. Handle the burrs carefully wearing protective gloves.  
•The burr lock button overheats if pressed while the turbine is operating.  
•Be very careful not to inadvertently press it inside the patient's mouth.  
•Use only burrs (or other similar tools) with CE Mark of compliance with Directive 93/42/EEC and subsequent additions and amendments, made with biocompatible materials complying with ISO 10993-1 and whose dimensions comply with EN ISO 1797-1 standards.  
•Use only original spare parts and accessories, or those authorised by the manufacturer.  
•Make sure that the surgical area cooling flow is present during operation. In the absence of cooling, suspend use of the device and contact the authorized technical support service.  
•Do not breathe into beam or view directly with optical instruments.

**Assembling the burrs**  
Simply press the middle of the button on the head to enable the burrs to be inserted and removed. Releasing the button locks the burr. Check carefully that the burr is fully inserted and locked, pulling it with two fingers. Do not press the burr release mechanism if the turbine is not completely still in order to avoid damaging the burr locking mechanism.

**Periodic Maintenance**  
Use of the device must be carried out with respect for the indications found in the specific Instruction Manual.  
The turbine must be lubricated at least once a day before each time it is sterilized in the autoclave with the special "DAILY OIL" spray using the appropriate adapters. Follow the instructions on the can, making sure to apply the spray in two short jets. After lubrication, replace the turbine on the cord and activate it in order to expel the excess lubricant (do this with a burr inserted in order to avoid mechanical damage to the instrument), then dry the outside of the device with gauze or cotton. Regular use of the lubricant spray ensures the best operating conditions for the instrument. At least once a week, lubricate the "O-Rings" located on the quick coupling, using S1 silicone lubricant. Wearing disposable gloves, apply a layer of grease on the fingertips and lubricate using the fingers. If liquids that potentially leave incrustations are used to supply the spray, it is recommended that the circuit be flushed well with water at the end of each use. The manufacturer requires an annual check or overhaul of the device by authorised service assistance personnel.

**Cleaning, Disinfection And Sterilisation**  
Before disinfection, remove the burr from the turbine and the turbine from the cord. To maintain the level of hygiene, after each use and within a short time, clean, disinfect and sterilize the turbine. Clean the spray nozzles spray both by using the special steel wire supplied and by blowing in air using the syringe. For cleaning and disinfection of the outside, use gauze or cotton soaked in ethyl alcohol 70% v/v. Sterilise in a steam autoclave max 135° C 220 kPa (2.2 bar) for 5 minutes (250 cycles tested – EN ISO 14457). Before each cycle in the autoclave, it is essential to lubricate the turbine using the "DAILY OIL" lubricant spray, applying two short jets. Reassemble the turbine on the cord and activate it in order to expel the excess lubricant. Dry the outside of the turbine with gauze or cotton and remove the quick coupling, if present, prior to sterilization.

•Do NOT sterilize the quick coupling.  
•Do not use ultrasound cleaners.  
•Do not immerse the turbine in disinfectant or sterilizing liquids.  
•Never sterilise the handpiece in a dry heat steriliser.  
•Do not leave the turbine in the autoclave at the end of the cycle.  
•Periodically check the autoclave according to the requirements of the manufacturer.

Sterilization temperatures above the limit may damage the device.

**Repairs and overhauls**  
Installation, overhaul, calibration and repair of the device must be performed exclusively by technical service assistance personnel authorised by the manufacturer.

**Intended Use**  
The method of application of the device is intermittent. The operational cycle indicated respects the following times:

Type of Instrument	Operation (minutes)	Pause (minutes)
Silent Power EVO 2	5	5
Silent Power EVO 2L	5	5
Silent Power EVO 4L / 4L-K	5	5
Silent Power EVO Miniature	5	5
Silent Power EVO Miniature K	5	5

**Environmental conditions for use:**  
- Ambient Temperature 10 - 40° C  
- Relative Humidity 30 - 75 %  
- Atmospheric Pressure 700 - 1060 hPa (700 - 1060 mBar)

**Environmental conditions permitted for transport and warehousing**  
- Ambient Temperature between -20 - +70° C  
- Relative Humidity 10 - 100 %  
- Atmospheric Pressure 500 - 1060 hPa (500 - 1060 mBar)






**Scraping**  
Scraping the device must be carried out with respect for the laws in force and according to the individual national laws. The materials used for the manufacture are not harmful for human beings or animals that come into contact with or that are exposed to them.

**F** (traduction of l'original en italien)

**Classement**  
Dispositif Médical de classe Ila selon la directive 93/42/CEE et ses modifications et ajouts ultérieurs. Le dispositif est fabriqué conformément aux normes 60601-1 et ISO 14457.

**Emploi prévu**  
Dispositif médical ou accessoire du dispositif médical destiné à l'usage professionnel de la part de l'odontologue, éventuellement assisté par le ou des dentistes autorisés. Le dispositif est destiné à être utilisé sur des unités dentaires conformes à la directive 93/42/CEE, et ses modifications et ajouts ultérieurs conformes à l'IEC 60601-1 (III ed.), et installés dans des environnements dotés d'une installation électrique conforme à la normative IEC 60364-7-710.

**Symboles**

	Symbole pour attirer l'attention sur des informations supplémentaires contenues dans le mode d'emploi de l'appareil.
	Symbole correspondant à "PARTIE APPLIQUEE DE TYPE B" selon IEC 60601-1. Il indique le degré de protection contre les contacts directs et indirects.
	Partie stérilisable dans l'autoclave
	Marque de conformité à la directive 93/42/CEE, et ses modifications et ajouts ultérieurs, "DISPOSITIFS MEDICAUX"
	Symbole pour l'élimination aux termes des Directives 002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC

**Précautions pour l'emploi**  
•Le dispositif n'est pas indiqué pour être utilisé en présence de mélanges d'anesthésique inflammable, d'oxygène ou de protoxyde d'azote.  
•Le dispositif doit être utilisé suivant les indications présentes dans la notice de mode d'emploi disponible sur le site Internet [www.sternweber.com](http://www.sternweber.com).  
•L'instrument est fourni à l'état non stérile. Avant de l'utiliser, le nettoyer et le désinfecter ou le stériliser (si ceci est possible) de façon adéquate.  
•L'utilisation de dispositifs dotés d'alimentation électrique peut interférer avec le fonctionnement de dispositifs médicaux actifs implantés tels que les pacemakers ou d'autres dispositifs actifs. En cas de doutes sur le traitement des patients porteurs de ces dispositifs, il est conseillé de s'adresser à des experts dans des centres de cardiologie ou à tout autre organisme médical compétent.  
•Au cours de l'utilisation, des projections de poussières et de fragments de matériaux provenant de la cavité orale du patient ou du dispositif pourraient se produire (poussières organiques et inorganiques, des fragments du dispositif ou de ses points, des matériaux biologiques potentiellement infectés).  
•Protéger le patient, quand ceci est possible, au moyen de la digue.  
•Apprendre au patient à respirer par le nez si la digue ne peut être appliquée.  
•Le personnel médical doit porter les dispositifs de protection personnelle adéquats.  
•Dans le cas de dommages visibles, d'émission de bruits insolites et/ou de vibrations ou si l'on ressent des températures excessives, ne pas utiliser le dispositif et s'adresser au réseau d'assistance technique agréée.  
•Avant tout usage, vérifier le blocage correct de des fraises. Si la fraise ne s'endèche pas correctement, NE PAS utiliser l'instrument.  
•Ne pas utiliser de fraises usagées ou endommagées. Manipuler les fraises avec précaution en portant des gants de protection.  
•Le bouton-poussoir de blocage de la fraise se surchauffe s'il est pressé durant le fonctionnement de la turbine.  
•Faire très attention à ne pas le presser par mégarde dans la cavité buccale du patient.  
•Utiliser exclusivement des fraises (ou d'autres instruments assimilables) portant la marque CE de conformité à la Directive 93/42/CEE, et modifications et addendas ultérieurs, réalisées avec des matériaux biocompatibles en conformité à la norme ISO 10993-1 et ayant des dimensions conformes à la norme EN ISO 1797-1.  
•Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires originaux ou expressément agréés par le fabricant.  
•Durant le fonctionnement, s'assurer de la présence du flux de refroidissement du champ opératoire.  
•Do not breathe into beam or view directly with optical instruments.  
•Radiation LED: ne pas fixer le rayon à l'œil nu ni le regarder directement avec des instruments optiques.

**Montage des fraises**  
Il suffit d'exercer une pression au centre du bouton-poussoir sur la tête pour permettre l'insertion et le désenclenchement des fraises. Quand l'outil est bloqué, le bouton-poussoir la fraise est bloquée. Vérifier soigneusement que la fraise est entièrement insérée et bloquée, en la tirant avec deux doigts. Ne pas presser sur le mécanisme de déblocage de la fraise si la turbine n'est pas complètement à l'arrêt pour éviter d'endommager le mécanisme de blocage de la fraise.

**Maintenance périodique**  
La maintenance périodique du dispositif doit avoir lieu conformément aux indications contenues dans la notice d'emploi. La turbine doit être lubrifiée au moins une fois par jour avant chaque stérilisation dans l'autoclave à l'aide du spray "DAILY OIL" prévu à cet effet en utilisant les adaptateurs spéciaux. Suivre les instructions indiquées sur le spray, en faisant en sorte de l'appliquer en deux brefs jets. Après la lubrification remonter la turbine sur le cordon et l'activer jusqu'à ce que le lubrifiant en excès soit expulsé (effectuer cette opération avec une fraise insérée de façon à éviter des dommages mécaniques à l'instrument), puis essuyer l'extérieur du dispositif avec de la gaze ou du coton. L'usage régulier du spray lubrifiant garantit la meilleure condition de fonctionnement de l'instrument. Au moins une fois par semaine lubrifier à l'aide de graisse lubrifiante silicone S1 les garnitures "O-Rings" situées sur la fixation rapide. Porter des gants jetables, appliquer un voile de graisse sur le bout des doigts et lubrifier avec les doigts. Si le spray est alimenté au moyen de liquides potentiellement incrustants, rincer le circuit au terme de l'utilisation. Le fabricant recommande d'effectuer le contrôle ou la révision du dispositif de la part de l'assistance agréée à une fréquence annuelle.

**Nettoyage Désinfection et Stérilisation**  
Avant la désinfection, retirez la fraise de la turbine et la turbine du cordon. Pour maintenir le niveau de sécurité hygiénique, au terme de chaque utilisation et au peu de temps, nettoyer, désinfecter et stériliser la turbine. Nettoyer les buses du spray, soit en utilisant le fil d'acier spécial fourni, soit en insufflant de l'air au moyen d'une seringue. Pour le nettoyage ou le stérilisation extérieure utiliser de la gaze ou du coton imbibé d'alcool éthylique 70% v/v. Stériliser dans l'autoclave à vapeur max 135° C 220 kPa (2.2 bar) pour 5 minutes (testé pour 250 cycles – EN ISO 14457). Avant chaque cycle dans l'autoclave il est indispensable de lubrifier la turbine en utilisant le spécial spray lubrifiant "DAILY OIL", et en appliquant deux brefs jets. Remonter la turbine sur le cordon et l'activer jusqu'à ce le lubrifiant en excès soit expulsé. Sécher l'extérieur de la turbine avec de la gaze ou du coton et enlever la fixation rapide, si elle est existe, avant de procéder à la stérilisation.

•NE PAS stériliser la fixation rapide.  
•Ne pas utiliser de machines nettoyeuses à ultrasons.  
•Ne pas plonger la turbine dans des liquides désinfectants ou stérilisants.  
•Ne pas stériliser le dispositif au moyen des stérilisateurs à chaleur sèche.  
•Ne pas laisser la turbine dans l'autoclave au terme du cycle.  
•Contrôler périodiquement l'autoclave selon les prescriptions du fabricant.  
•Des températures de stérilisation supérieures à la limite indiquée peuvent endommager le dispositif.

**Réparations et révisions**  
Le montage, les révisions, les calibrages et les réparations doivent être effectués par le personnel technique agréé.

**Modalités d'emploi**  
La modalité d'emploi est intermittente. Le cycle de fonctionnement prévu respecte les temps suivants:

Type d'instrument	Fonctionnement (minutes)	Pause (minutes)
Silent Power EVO 2	5	5
Silent Power EVO 2L	5	5
Silent Power EVO 4L / 4L-K	5	5
Silent Power EVO Miniature	5	5
Silent Power EVO Miniature K	5	5

**Conditions environnementales d'utilisation**  
- Température ambiante 10 - 40° C  
- Humidité relative 30 - 75 %  
- Pression atmosphérique 700 - 1060 hPa (700 - 1060 mBar)

**Conditions environnementales admises pour le transport et l'emmagasinement**  
- Température ambiante comprise entre -20 - +70° C  
- Humidité relative 10 - 100 %  
- Pression atmosphérique 500 - 1060 hPa (500 - 1060 mBar)






**Élimination**  
L'élimination du dispositif devra avoir lieu conformément aux normes en vigueur selon chaque législation nationale. Les matériaux utilisés pour la construction ne présentent pas de dangers pour le contact et l'exposition des êtres humains et des animaux.

**D** (Übersetzung aus dem Original in Italienisch)

**Klassifizierung**  
Ärztliche Vorrichtung Klasse Ila gemäß der Richtlinie 93/42/CEE mit späteren Änderungen und Ergänzungen. Die Vorrichtung wurde in Übereinstimmung der Norm IEC 60601-1 und ISO 14457 gebaut.

**Üblicher Einsatz**  
Ärztliche Vorrichtung oder Zusatzteil für die ärztliche Vorrichtung für den professionellen Gebrauch der Zahnmediziner bestimmt, gegebenenfalls durch befugtes Franchisepersonal assistiert. Das Gerät ist für den Einsatz an Dentaleinheiten bestimmt, die mit der Richtlinie 93/42/EWG mit späteren Änderungen und Ergänzungen konform sind, und die der Norm 60601-1 (III. Ausg.) entsprechen, konform sind und die in Räumen mit elektrischem Anschluss, welcher der Vorschrift IEC 60364-7-710 entspricht, bestimmt.

**Symbole**

	Symbol, um auf weitere Informationen, die in den Gebrauchsanleitungen für die Vorrichtung aufgeführt sind, aufmerksam zu machen.
	Symbol entsprechend des "ANWENDUNGSBEREICHES DES TYP B" gemäß IEC 60601-1. Zeigt den Schutzgrad gegenüber den direkten und indirekten Kontakten an.
	Teil, der im Autoklaven sterilisiert werden kann
	Zeichen der Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/CEE, mit späteren Änderungen und Ergänzungen, "ÄRZTLICHE VORRICHTUNGEN"
	Symbol für die Entsorgung gemäß der Richtlinien 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC

**Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch**  
•Die Vorrichtung ist für den Einsatz in Präsenz von brennbaren Betäubungsmischungen oder Sauerstoff oder Kohlendioxid nicht geeignet.  
•Der Gebrauch der Vorrichtung muss unter Beachtung der Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, das auf der Website [www.sternweber.com](http://www.sternweber.com) verfügbar ist, durchgeführt werden.  
•Das Instrument wird in nicht sterilisiert Zustand geliefert. Vor dem Einsatz entsprechend reinigen, desinfizieren oder sterilisieren (wenn möglich).  
•Der Einsatz der Vorrichtung mit elektrischer Versorgung kann den Betrieb von aktiven Implantaten, wie Herzschrittmakern oder andere aktive Geräte, stören. Im Zweifelsfall bei Patienten, die solche Geräte tragen, wird empfohlen, sich an das Fachpersonal von Kardiologiezentren oder anderer kompetenter Medizinzentren zu wenden.  
•Während des Einsatzes können sich Staub und Metallpartikeln aus der Mundhöhle oder Patienten aus der von selbigen Vorrichtung mit gewaliger Wirkung (organischer und inorganischer Staub, Teilchen vom Gerät oder von seinen Spitzen, biologisches hoch infektiöses Material).  
•Den Patienten, wenn möglich mit einem Kofferdam schützen.  
•Den Patienten dazu aufordern durch die Nase zu atmen, sollte die Anwendung des Geräts erforderlich sein.  
•Der Schalter für das Einsetzen der Fräse überhitzt sich, wenn er während des nicht autorisierten technischen Kundendienstes werden.  
•Die Fräse wird überhitzt, falls Fräsen richtig sitzt. Wenn die Fräse nicht richtig einrastet, das Gerät NICHT verwenden.  
•Keine abgenutzten oder beschädigten Fräsen verwenden. Die Fräsen vorsichtig bewegen und Schutzanschnüre tragen.  
•Vor dem Gebrauch der Vorrichtung muss sichergestellt sein, dass die Fräse nicht richtig in der Turbinenbetriebsgehäuse gedrückt gehalten wird.  
•Maximale Aufmerksamkeits ist geboten, dass es nicht aus Versehen im Rückenraum des Patienten aktiviert wird.  
•Ausschließlich Fräsen (oder andere vergleichbare Geräte) verwenden, die mit dem EG-Zeichen versehen sind und die Richtlinie 93/42/EWG, CE, mit späteren Änderungen und Ergänzungen, konform sind und mit biokompatiblen Materialien in Übereinstimmung mit der Vorschrift ISO 10993-1 und in Übereinstimmung mit der Vorschrift EN ISO 1797-1 hergestellt wurden.  
•Ausschließlich originale oder ausdrücklich durch den Hersteller autorisierte Ersatz- und Ersatzteile verwenden.  
•Feststellen, dass während des Betriebes der Kühlungsstufe des Operationsfeldes vorhanden ist. Bei fehlender Kühlung den Gebrauch des Gerätes unterbrechen und den autorisierten Kundendienst kontaktieren.  
•Do not breathe into beam or view directly with optical instruments.  
•Radiation LED: nicht fixieren das Licht mit bloßem Auge fixieren noch direkt mit optischen Geräten betrachten.

**Montage der Fräsen**  
Ein einfacher Druck auf die Mitte der Taste des Kopfes reicht aus, um die Fräse einzuführen und wieder abzunehmen. Wird der Knopf losgelassen, rastet die Fräse ein. Sorgfältig überprüfen, dass die Fräse auch vollständig eingefügt und eingekrastet ist. Die Fräse darf nicht mit Fingern ziehen. Nicht auf den Kopf des Instruments drücken, wenn die Turbinen nicht vollständig stillsteht, damit eine Beschädigung dieses Mechanismus vermieden wird.

**Regelmäßige Wartung**  
Die regelmäßige Wartung der Vorrichtung muss mit den Anweisungen gemäß des speziellen Handbuchs der Gebrauchsanweisungen, übereinstimmend mit der Richtlinie 93/42/CEE und der Richtlinie 93/42/CEE, CE, mit späteren Änderungen und Ergänzungen, konform sind und mit biokompatiblen Materialien in Übereinstimmung mit der Vorschrift ISO 10993-1 und in Übereinstimmung mit der Vorschrift EN ISO 1797-1 hergestellt wurden.  
•Ausschließlich originale oder ausdrücklich durch den Hersteller autorisierte Ersatz- und Ersatzteile verwenden.  
•Feststellen, dass während des Betriebes der Kühlungsstufe des Operationsfeldes vorhanden ist. Bei fehlender Kühlung den Gebrauch des Gerätes unterbrechen und den autorisierten Kundendienst kontaktieren.  
•Do not breathe into beam or view directly with optical instruments.  
•Radiation LED: nicht fixieren das Licht mit bloßem Auge fixieren noch direkt mit optischen Geräten betrachten.

**Reinigung/Desinfizierung und Sterilisation**  
Vor den Reinigungsvorgängen die Fräse aus der Turbine ziehen und die Turbine von der Leitung abtrennen. Damit das hygienische Sicherheitsniveau beibehalten wird, nach jedem Einsatz und innerhalb kurzer Zeit die Turbine reinigen, desinfizieren und sterilisieren. Die Spraydüsen reinigen, dafür sowohl den extra dafür vorgesehenen Adapter verwenden, als auch Luft mittels einer Spritze einblasen. Für die Reinigung und/oder externe Desinfizierung Mull oder Watte in Äthylalkohol 70% v/v getränkt, verwenden. Im Wasseranlaufdruck max. 135° C/ 220 kPa (2.2 bar) 5 Minuten (getestet für 250 Zyklen – EN ISO 14457). Vor jedem Zyklus im Autoklaven S1 Silikonfett auf die Dichtung "O-Rings" auf dem Schnellanschluss auftragen. Einmalhandschuhe anziehen und eine Fettschicht auf die Fingerkuppen geben und mit den Fingern einfetten. Wenn das Spray mit Flüssigkeiten versorgt wird, die zu starken Verkalkungen führen, muss der Krieslauf nach Beenden des Einsatzes mit Wasser durchgespült werden. Der Hersteller schreibt die jährliche Kontrolle oder Revision der Vorrichtung durch den autorisierten Kundendienst vor.

**Reinigung/Desinfizierung und Sterilisation**  
Vor den Reinigungsvorgängen die Fräse aus der Turbine ziehen und die Turbine von der Leitung abtrennen. Damit das hygienische Sicherheitsniveau beibehalten wird, nach jedem Einsatz und innerhalb kurzer Zeit die Turbine reinigen, desinfizieren und sterilisieren. Die Spraydüsen reinigen, dafür sowohl den extra dafür vorgesehenen Adapter verwenden, als auch Luft mittels einer Spritze einblasen. Für die Reinigung und/oder externe Desinfizierung Mull oder Watte in Äthylalkohol 70% v/v getränkt, verwenden. Im Wasseranlaufdruck max. 135° C/ 220 kPa (2.2 bar) 5 Minuten (getestet für 250 Zyklen – EN ISO 14457). Vor jedem Zyklus im Autoklaven S1 Silikonfett auf die Dichtung "O-Rings" auf dem Schnellanschluss auftragen. Einmalhandschuhe anziehen und eine Fettschicht auf die Fingerkuppen geben und mit den Fingern einfetten. Wenn das Spray mit Flüssigkeiten versorgt wird, die zu starken Verkalkungen führen, muss der Krieslauf nach Beenden des Einsatzes mit Wasser durchgespült werden. Der Hersteller schreibt die jährliche Kontrolle oder Revision der Vorrichtung durch den autorisierten Kundendienst vor.

**Reparaturen und Revisionen**  
Die Installation, die Revisionen, die Eichungen und die Reparaturen der Vorrichtung müssen von technischem Personal und vom Hersteller autorisierten Personal durchgeführt werden.

**Einsatzmodalität**  
Die Einsatzmodalität der Vorrichtung ist intermittierend. Der vorgesehene Betriebszyklus beachtet folgende Zeiten:

Instrumententyp	Betrieb (Minuten)	Pause (Minuten)
Silent Power EVO 2	5	5
Silent Power EVO 2L	5	5
Silent Power EVO 4L / 4L-K	5	5
Silent Power EVO Miniature	5	5
Silent Power EVO Miniature K	5	5

**Raumbedingungen des Einsatzes**  
- Raumtemperatur 10 - 40° C  
- Relative Feuchtigkeit 30 - 75 %  
- Luftdruck 700 - 1060 hPa (700 - 1060 mBar)

**Zulässige Raumbedingungen für den Transport und die Lagerung**  
- Raumtemperatur zwischen -20 - +70° C  
- Relative Feuchtigkeit 10 - 100 %  
- Luftdruck 500 - 1060 hPa (500 - 1060 mBar)





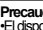
**Entsorgung**  
Die Entsorgung der Vorrichtung muss entsprechend der nationalen geltenden Rechtsprechung der jeweiligen Nation durchgeführt werden. Die für die Herstellung verwendeten Materialien stellen keine Gefahr bezüglich des Kontaktes und der Belichtung gegenüber der Menschen und der Tiere dar.

**E** (traducción del original en italiano)

**Clasificación**  
Dispositivo médico de clase Ila según la directiva 93/42/CEE y sus sucesivas modificaciones e incorporaciones. El dispositivo ha sido construido en conformidad con la norma IEC 60601-1 e ISO 14457.

**Empelo previsto**  
Dispositivo médico o accesorio de dispositivo médico, destinado al uso profesional por parte del odontólogo, eventualmente asistido por el personal de odontología, con el consentimiento del paciente. El dispositivo está destinado al empleo en equipos dentales conformes a la directiva 93/42/CEE y sus sucesivas modificaciones e incorporaciones conformes a la IEC 60601-1 (III ed.) e instalados en ambientes con instalación eléctrica conforme a la normativa IEC 60364-7-710.

**Simbología**

	Simbolo para llamar la atención sobre ulteriores informaciones citadas en el manual de uso del aparato.
	Simbolo corrispondente a "PARTE APPLICATA DI TIPO B" según IEC 60601-1. Indica el grado de protección contra los contactos directos e indirectos.
	Parte esterilizable en autoclave
	Marca de conformidad a la directiva 93/42/CEE y sus sucesivas modificaciones e incorporaciones, "DISPOSITIVOS MEDICOS"
	Simbolo para la eliminación en virtud de las Directivas 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC

**Precauciones de uso**  
•El dispositivo no es adecuado para un empleo en presencia de mezclas de anestesia inflamables y oxígeno o protóxido de nitrógeno.  
•El uso del dispositivo debe realizarse en el respeto de las indicaciones presentes en el manual de instrucciones disponible en el sitio internet [www.sternweber.com](http://www.sternweber.com).  
•El instrumento se suministra en estado no estéril. Antes del uso, realizar la limpieza, la desinfección o esterilización del mismo (si fuera aplicable).  
•El uso de dispositivos con alimentación eléctrica puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos activos implantados como los pace-maker u otros dispositivos activos. En caso de dudas sobre el tratamiento de pacientes portadores de dichos dispositivos, se aconseja consultar a expertos de los centros de cardiología u otro centro médico competente.  
•Durante el uso pueden proyectarse en el ambiente polvos y fragmentos de materiales procedentes de la cavidad oral del paciente o del mismo dispositivo (polvos orgánicos e inorgánicos, fragmentos del dispositivo o de sus puntas, materiales biológicos potencialmente infecciosos).  
•Proteger al paciente, cuando fuera posible, mediante el empleo del dique.  
•Instruir al paciente a respirar con la nariz en los casos que no se coloque el dique.  
•El personal médico debe usar los correspondientes dispositivos de protección personal.  
•En caso de daños visibles, emisión de ruidos insólitos u/o vibraciones o si se advierten temperaturas excesivas, no usar el dispositivo y dirigirse a la asistencia técnica autorizada.  
•Antes de cada uso, verificar el bloqueo correcto de las fresas. Si la fresa no se acepta correctamente, NO utilizar el instrumento.  
•No usar fresas desgastadas o dañadas. Manipular las fresas con cuidado usando protectores de protección.  
•El botón de bloqueo de la fresa se recalienta si se lo presiona durante el funcionamiento de la turbina.  
•Fijar la fresa con máxima atención de no presionarlo inadvertidamente dentro de la cavidad oral del paciente.  
•Utilizar exclusivamente fresas (u otros utensilios asimilables) que tengan la marca CE de conformidad a la Directiva 93/42/CEE y sus sucesivas modificaciones e incorporaciones, realizadas con materiales biocompatibles en conformidad con la norma ISO 10993-1 y con dimensiones que cumplan con la norma EN ISO 1797-1.  
•Utilizar exclusivamente repuestos y accesorios originales o autorizados expresamente por el fabricante.  
•Asegurarse de que durante el funcionamiento fluya aire de enfriamiento del campo quirúrgico.  
•Do not breathe into beam or view directly with optical instruments.  
•Radiación LED: no fijar el haz sin protección ocular, ni mirar directamente con instrumentos ópticos.

**Montaje de las fresas**  
Las fresas se conectan y desconectan mediante la simple presión en el centro del botón del cabezal. Al soltar el botón, se bloquea la fresa. Comprobar cuidadosamente que la fresa esté totalmente conectada y bloqueada, tirándola con dos dedos. No presionar en el mecanismo de desbloqueo de la fresa si la turbina está totalmente firme para evitar dañar el mecanismo de bloqueo de la fresa.

**Mantenimiento periódico**  
El mantenimiento periódico del dispositivo debe realizarse en el respeto de las indicaciones presentes en el manual de instrucciones. La turbina debe lubricarse como mínimo una vez por día y antes de cada esterilización en autoclave mediante el respectivo spray "DAILY OIL" utilizando los respectivos adaptadores. Seguir las instrucciones indicadas en la botornita, con la precaución de aplicar el spray en dos breves chorros. Después de la lubricación, volver a montar la turbina en el cordón y activarla hasta expulsar el lubricante excedente (ejecutar dicha operación con una fresa introducida de modo tal de evitar daños mecánicos en el instrumento), después secar el exterior del dispositivo con una gasa o algodón. El uso regular del spray lubrificante asegura la mejor condición de funcionamiento del instrumento. Por lo menos una vez por semana, lubricar con grasa lubricante de silicona S1 los empujadores "O-Rings" situados en el acoplamiento rápido. Usando guantes desechables, aplicar una capa de grasa en las pulpas digitales y lubricar con los dedos. En el caso que el spray se alimente con líquidos potencialmente incrustantes, se prescribe enjuagar el circuito con agua al final del uso. El fabricante prescribe el control o la revisión del dispositivo por parte de la asistencia autorizada con intervalo anual.

**Limpieza, desinfección y esterilización**  
Antes de realizar las operaciones de higienización, desprender la fresa de la turbina y la turbina del cordón. Para mantener el nivel de seguridad higiénica, al final de cada uso y dentro de breve tiempo, limpiar, desinfectar y esterilizar la turbina. Limpiar las boquillas del spray utilizando el hilo de acero suministrado en dotación o inyectando aire mediante una jeringa. Para la limpieza y/o desinfección externa utilizar gasa o algodón embebido en alcohol etílico 70% v/v. Esterilizar en autoclave de vapor max 135° C 220 kPa (2.2 bar) 5 minutos (probado a 250 ciclos – EN ISO 14457) o de modo conforme a lo previsto por los protocolos y/o por las normas vigentes según las legislaciones nacionales. Antes de cada ciclo en autoclave es indispensable lubricar S1 la nasca del empujador "O-Rings" situado en el acoplamiento rápido. Usando guantes desechables, aplicar una capa de grasa en las pulpas digitales y lubricar con los dedos. En el caso que el spray se alimente con líquidos potencialmente incrustantes, se prescribe enjuagar el circuito con agua al final del uso. El fabricante prescribe el control o la revisión del dispositivo por parte de la asistencia autorizada con intervalo anual.

•No usar limpiadores de ultrasonidos.  
•No sumergir la turbina en líquidos desinfectantes o esterilizantes.  
•No esterilizar el dispositivo con esterilizadores de calor seco.  
•No dejar la turbina en autoclave al final del ciclo.  
•Controlar periódicamente el autoclave según las prescripciones del fabricante.  
•Temperaturas de esterilización más allá del límite indicado pueden dañar el dispositivo.

**Reparaciones y revisiones**  
La instalación, las revisiones, los calibrados y reparaciones del dispositivo deben realizarse por personal técnico autorizado por el fabricante.

**Modo de empleo**  
La modalidad de empleo del dispositivo es intermitente. El ciclo de funcionamiento previsto respeta los siguientes tiempos:

Typo de instrumento	Fuionamiento (minutos)	Pausa (minutos)
Silent Power EVO 2	5	5
Silent Power EVO 2L	5	5
Silent Power EVO 4L / 4L-K	5	5
Silent Power EVO Miniature	5	5
Silent Power EVO Miniature K	5	5

**Condiciones ambientales de uso**  
- Temperatura ambiente 10 - 40° C  
- Humedad relativa 30 - 75 %  
- Presión atmosférica 700 - 1060 hPa (700 - 1060 mBar)

**Condiciones ambientales admitidas para el transporte y el almacenamiento**  
- Temperatura ambiente comprendida entre -20 - +70° C  
- Humedad relativa 10 - 100 %  
- Presión atmosférica 500 - 1060 hPa (500 - 1060 mBar)

**Eliminación**  
La eliminación del dispositivo deberá realizarse en el respeto de las normativas vigentes según las legislaciones nacionales. Los materiales empleados para la construcción no presentan peligros al contacto y a la exposición para los seres humanos y para los animales.

**Py** (Перевод с оригинала в итальянском)

**Классификация**  
Это — медицинское устройство класса Ila, являющееся в соответствии с положениями директивы 93/42/CEE и последующие модификации и дополнения. Устройство сконструировано в соответствии со стандартом IEC 60601-1 e ISO 14457.

**Предусмотренный способ эксплуатации**  
Это — медицинское устройство, или дополнительное оборудование медицинского устройства, предназначенное для профессионального использования со стороны персонала стоматологической клиники, с согласия пациента. Данное устройство предназначено для применения на стоматологических установках, являющихся в соответствии с положениями директивы 93/42/CEE и последующие модификации и дополнения а также требованиями стандарта IEC 60601-1 (III Изд.), которые устанавливаются в помещениях, являющихся в соответствии с действующими стандартами, касающимися помещений медицинского назначения, одобренных электротехнической, являющейся в соответствии со стандартом IEC 60364-7-710.